



BOSCH

Invented for life

Eine neue Dimension im
Asthma-Management
mit Vivatmo

Das einzigartige Vivatmo-System ermöglicht ein effizientes Asthma-Management

Das Vivatmo Produkt Portfolio besteht aus

- ▶ **Vivatmo pro** professionelles Gerät für Ärzte
- ▶ **Vivatmo me** Heimmessgerät für Asthma-Patienten
- ▶ **Vivatmo app** digitales Asthma Tagebuch für die Dokumentation der FeNO-Werte, der Medikation und des Gesundheitszustands der Patienten



Therapie-Monitoring



Verbesserte Adhärenz



Besseres Asthma-Management

Vorteile des Vivatmo-Systems

- ▶ Optimales Monitoring der Entzündungswerte in der Praxis und beim Patienten zu Hause
- ▶ FeNO-Werte als wertvolle Information für Therapieentscheidungen und Therapie-Monitoring
- ▶ Wertschätzende Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Patienten führt zu besserer Adhärenz und allgemeiner Zufriedenheit
- ▶ Hochpräzise Sensortechnik und Bosch Qualität made in Germany

Was Vivatmo einzigartig macht:

- 1. Perfekt für den Routineeinsatz:** Die Vivatmo Geräte sind **Wartungs- und Kalibrierungsfrei**. Sie sind für Anfänger und Experten einfach, schnell und intuitiv zu bedienen.
- 2. Zum Mitnehmen:** Das Vivatmo Handgerät ist **mobil, kabellos**, leicht und besonders ergonomisch.
- 3. Mehr als nur ein Mundstück:** Das ergonomische Design des Einweg-Mundstücks unterstützt ein korrektes Atemmanöver. Die Atemprobe wird **gefiltert, gereinigt und für die NO-Messung vorbereitet**. Da Nutzer nur in das Mundstück ausatmen, ist das Risiko für eine Kreuzinfektion stark reduziert.

Vivatmo pro für Ärzte

FeNO Messung für höheren Durchsatz in Praxen und Kliniken

- ▶ bis zu 5.000 Messversuche oder 5 Jahre Lebensdauer **ohne Wartung oder Kalibrierung**
- ▶ Basisstation mit großem hochwertigem Touchscreen und **mobilem Handgerät für Einzelmessungen**
- ▶ Verschiedene Arten der **Visualisierung** für die optimale Unterstützung der Messleistung des Patienten
- ▶ Qualitätskontrolle mit zwei Referenzpunkten und Umgebungs-NO-Messung



Einfache und sichere Datenverwaltung und -austausch

- ▶ Patientendaten-Management-System mit bis zu 10.000 Patientendateien, inklusive Exportfunktion und Sofortdruck
- ▶ Backup-Funktionalität und optionale Benutzerverwaltung mit Login zur Unterstützung der Datensicherheit im klinischen Umfeld
- ▶ Technische Unterstützung von mehreren modernen Datenaustauschoptionen: Drahtlos über Wifi, über USB- oder Ethernet-Anschlüsse, über das EPR der Klinik via HL7 /GDT
- ▶ **Remote-Software-Updates** über die **Vivasuite** connectivity Plattform erhältlich




Vivatmo me für Asthma Patienten

Das weltweit erste FeNO-Messgerät für Zuhause

- ▶ Mobiles Handgerät in Kombination mit der Vivatmo-App für ein besseres Asthma-Management
- ▶ Bis zu 1.000 Messungen oder 3 Jahre Lebensdauer ohne Wartung oder Kalibrierung
- ▶ Einfache und intuitive Benutzerführung während der Messung mit dreifarbigem LED und Feedback-Ton
- ▶ Ergebnisinterpretation wird durch Ampelklassifizierung und Trendpfeile unterstützt

Ideale Ergänzung: kostenlose Vivatmo app als digitales Asthma-Tagebuch

- ▶ Die App gibt einen guten Überblick über FeNO-Werte, Peak-Flow-Ergebnisse, Medikamente und Asthmaanfälle
- ▶ Regionale Pollenvorhersage in Zusammenarbeit mit der Universität Wien
- ▶ Monatliche Berichte über alle Daten können gespeichert oder mit dem Arzt geteilt werden und zeigen den Verlauf der Entzündungswerte

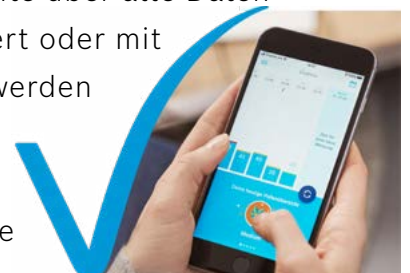

Bosch Healthcare Solutions GmbH

Stuttgarter Str. 130
D-71332 Waiblingen
Tel. +49-(0) 711-811-0

www.vivatmo-hcp.com

MDQ-01.733-01-EBA-123

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Gedruckt in Deutschland. Eventuelle Farbabweichungen sind auf die Grenzen des Druckverfahrens zurückzuführen.
Gedruckt auf 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff, hergestellt in einem umweltfreundlichen Verfahren.
Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Vertreter nach der Verfügbarkeit in bestimmten Märkten. Nur für die In-vitro-Diagnostik geeignet.

Vertrieb Österreich:



NZ Techno Handels GmbH

A-1010 Wien, Gonzagagasse 11,
Telefon +43 1 535 60 85

www.nztechno.at